


イトー US-777

■仕様

定格電源	AC100V(50/60Hz)
定格消費電力	70VA
発振周波数	1.0MHz・3.0MHz
超音波出力	最大有効強度 2.0W/cm ² (連続)、瞬時最大強度 3.0W/cm ² (パルス)
パルス周波数	100Hz・1000Hz
タイマー	1～30分
電撃に対する保護の形式と程度	クラスⅠ・BF形
サイズ	(W) 290 × (D) 233 × (H) 96 (mm)
重量	約3kg

■メーカー希望小売価格 498,000円

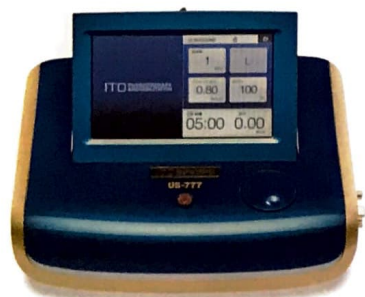

ITO GEL WARMER



治療用ゲルウォーマー

イトー ゲルウォーマー

メーカー希望小売価格 22,000円

- ゲルボルトを差し込むだけの簡単セッティング
- 約40℃の快速温度を自動制御

※医療機器ではありません。

付属品 販売価格

① 超音波プローブ 〈L・2m・黒〉	68,000円
② イトー超音波ゲル〈260g〉	950円
③ プローブホルダー 〈3穴タイプ 黒付・マグネット付〉	4,500円
④ 電源コード	6,000円
⑤ 超音波プローブ 〈S・2m・黒〉	68,000円
⑥ E.S.Tケーブル 〈Aタイプ・大型用〉	12,000円
⑦ E.S.Tケーブル 〈Bタイプ・小型用〉	5,000円
⑧ コンビネーションケーブル 〈Cタイプ〉+コアフィルター×3	14,000円
⑨ イトー超音波ゲル詰め入れ 〈5kg〉	8,400円

※□の商品は別売付属品です。※価格は税別価格です。



イトー メディカルワゴンⅡ

メーカー希望小売価格 18,000円

サイズ (W) 470 × (D) 360 × (H) 900 (mm)

※医療機器ではありません。

私たちの先進技術が世界の医療現場で選ばれています。 「根拠に基づく物理療法の確立」をいち早く追求してきました。

私たちの物理療法機器が使用されているのは世界100ヶ国以上。 医療分野の世界的潮流であるEBM(根拠に基づく医療)を取り入れ、医療現場へ根拠と情報を積極的に開示し、信頼にお応えしていきます。

多くのスポーツ団体をサポートしています。

- 株式会社 茨城ロケット・スポーツエンターテインメント
- 株式会社 鹿島アントラーズFC
- スーパーラグビー-日本チーム サンウルブズ
- シーホース三河 株式会社
- 新体操 日本代表チーム
- 株式会社 千葉ジェッツふなばし
- 公益財団法人 全日本柔道連盟
- 公益財団法人 全日本スキー連盟
- 株式会社 新潟アルビレックスランニングクラブ

- 公益財団法人 日本アイスホッケー連盟
- 公益財団法人 日本ウエイトリフティング協会
- 一般社団法人 日本車いすテニス協会
- 一般社団法人 日本競輪選手会
- 一般社団法人 日本ゴルフボール協会
- 公益財団法人 日本自転車競技連盟
- 一般社団法人 日本障がい者パドミントン連盟
- 公益財団法人 日本セーリング連盟

- 一般社団法人 日本デフバレーボール協会
- 一般社団法人 日本トップリーグ連携機構
- 公益財団法人 日本バドミントン協会
- 一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟
- 公益財団法人 日本ハンドボール協会
- 公益財団法人 日本フencing協会
- 公益財団法人 日本ボート協会
- 公益財団法人 日本陸上競技連盟

(50音順)

■お問い合わせ先

製造販売元  伊藤超短波株式会社

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8

製品に関するお問い合わせはこちらまで

メディカル営業部 <http://www.medical.itolator.co.jp/>

営業所	札幌	TEL.011(820)2830	FAX.011(842)1562
	仙台	TEL.022(306)7667	FAX.022(306)7688
	埼玉	TEL.048(254)1013	FAX.048(254)1014
	東京	TEL.03(3812)1217	FAX.03(3814)4587
	横浜	TEL.045(949)0023	FAX.045(949)0025
	名古屋	TEL.052(701)4515	FAX.052(701)6905
	大阪	TEL.072(242)1043	FAX.072(242)1040
	広島	TEL.082(292)3330	FAX.082(292)3331
	福岡	TEL.092(573)6053	FAX.092(573)0218

生体深部までエネルギーを到達させることができる超音波により、
疼痛の緩解、筋や関節の痛みの軽減を目的とした治療が行えます。
また、電気刺激装置と組み合わせたコンビネーション治療も可能で、
超音波と電気刺激が患部に働きかけることで、それぞれの治療効果を生み出します。



ULTRA SOUND US-777


深部の患部も直接温める立体加温

超音波が生体組織に照射される際に生じる熱で、温熱作用を発生。超音波が到達している範囲を立体的に温めることができます。



1秒間に数百万回のマイクロマッサージ効果

プローブの中の結晶体を伸縮させることで「圧電効果」による音波を発生。1秒間に100万回(1MHz)/300万回(3MHz)の高速度マイクロマッサージにより、深部に直接刺激を与えることができます。

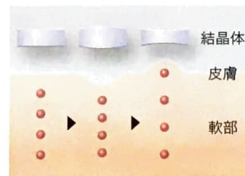

治療の理解を高める情報表示画面

治療が開始されると画面に超音波の出力イメージが表示されます。また、治療内容やモードの説明を表示することで、治療への理解を深めます。



2周波対応のLプローブ

1MHz(深部)と3MHz(浅部)の2周波に対応。治療中の周波数をリアルタイムでモニターして、出力を安定させています。また、プローブヘッドが高温になった時は「プローブヘッド温度エラー」が表示され、安全性にも配慮しています。



電気刺激装置との「コンビネーション治療」が可能


US-777と電気刺激装置をケーブル(別売付属品)で接続することで、超音波と電気刺激によるコンビネーション治療が可能です。



■US-777と使用する電気刺激装置を、ケーブルで接続します。



■超音波と電気刺激を組み合わせた治療が行えます。2つの刺激が働きかけることで、それぞれの治療効果を生み出します。

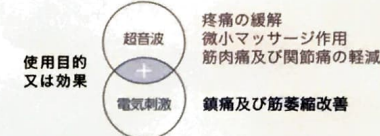

治療例



1MHz



1MHz



3MHz



3MHz